


取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。
正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読み下さい。
また、読まれたあとは大切に保管して下さい。

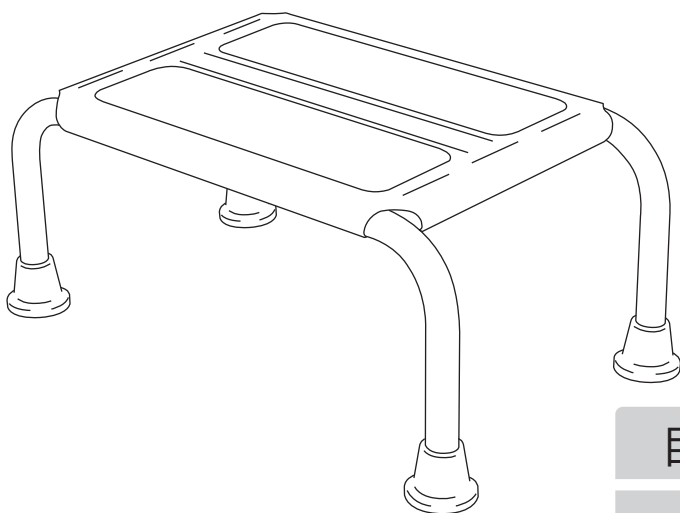

目次

ご使用前の注意	1 P
ご使用上の注意	1 P
お手入れ方法	1 P
ご使用方法	2 P
半身浴のしかた	2 P
各部の名称と製品仕様	3 P

製品に関して不明な点や不都合なことがございましたら、
ご購入販売店もしくは弊社カスタマーサポート室にご連絡下さい。

介護用品総合メーカー

株式会社 幸和製作所

〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町3丁159番地1

【カスタマーサポート室】10時～17時(土・日・祝日を除く)

0120-508-058

フリーコール フリーコール コーワ オーコーワ

<http://www.kowa-ws.co.jp>

ご使用前の注意

- パイプに変形はないか、脚ゴムにひび割れ・破れ・磨耗による異常はないか等、各部を必ず点検して下さい。
- 脚ゴムが確実に取り付けられていることを確認して下さい。

ご使用上の注意



警告

誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性があるため、下記の項目を必ず守って下さい。

- 天板を押さえつけてぐらつきがないか確認して下さい。
- 浴槽内の平らで安定した場所に置いて使用して下さい。
- 最大使用者体重を必ず守って下さい。
- 踏み台として使用しないで下さい。
- 浴槽内のイス以外の用途には、使用しないで下さい。



注意


誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性があるため、下記の項目を必ず守って下さい。

- 入浴動作は、身体を確実に安定させ、ゆっくりと行って下さい。
- 追い焚き付き給湯器や直焚き浴槽、お湯が循環している浴槽で使用する場合は、湯沸しが完了してから設置して下さい。
- 沸き出し口にかかる位置に置かないで下さい。
- 熱湯をかけないで下さい。製品本体の変形ややけどの原因になります。
- すべりやすい浴槽では使用しないで下さい。
- 使用後は浴槽から取り出して下さい。
- まれに、もらい錆が発生することがありますので、まめにお手入れを行って下さい。

お手入れ方法

- 柔らかい布やスポンジに、うすめた浴室用中性洗剤を含ませて汚れを取った後、きれいな水で洗剤を洗い流して下さい。その後、陰干しあるいは乾いた布で乾拭きして下さい。
- タワシや研磨剤入りのスポンジ、磨き粉などは使用しないで下さい。
- 塩素系洗剤・シンナー・クレゾールなどは絶対に使用しないで下さい。プラスチックの劣化や破損をまねくことがあります。

ご使用方法

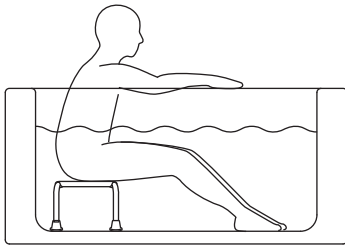

1 浴槽の手すりやフチなどを持って、片足ずつゆっくりと浴槽の中へ入って下さい。

2 身体の安定を保ちながら、ゆっくりと座って下さい。

※浴槽から出る場合は、逆の手順で行って下さい。

⚠ 注意

- 踏み台としては使用しないで下さい。
- 温泉や入浴剤入りのお湯が入った浴槽内には設置しないで下さい。プラスチックの劣化や破損をまねき、ケガをする恐れがあります。
- 浴槽内では、浴槽のフチにつかまるなどして、浴槽台からすべり落ちないように注意して下さい。


半身浴のしかた

体温より少し高い温度のぬるいお湯に、胸よりも下だけつかると効果的です。時間は20分程度を目安にして下さい。

⚠ 注意

- 半身浴中は、汗をたくさんかくため、脱水症状にならないように水分補給を行って下さい。※半身浴中にも浴室に飲み物を持って入り、水分補給をすることをおすすめします。
- 40度以上のお湯に長時間つかるとは心臓などに負担がかかるため絶対に避けて下さい。
- 風邪気味で熱っぽい時や生理中などの体調が優れない時は避けて下さい。また、食後すぐも避けて下さい。
- お酒を飲んだ後に半身浴は行わないで下さい。飲酒後は血圧が不安定になりがちなので、体調不良を招く恐れがあります。
- 体に持病がある方は、医師に相談してから始めて下さい。

各部の名称と製品仕様

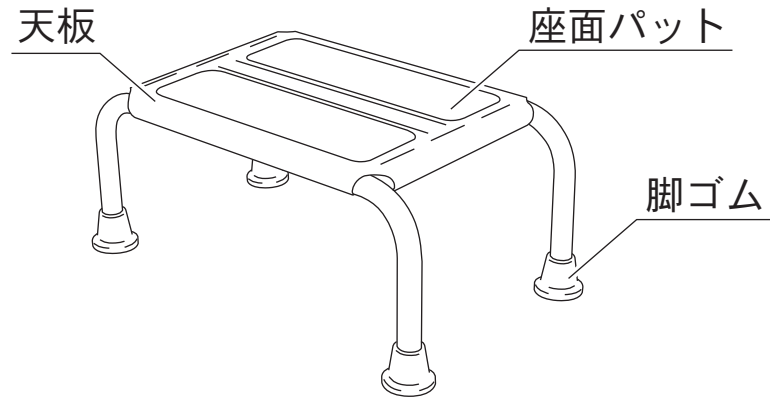

組み立て寸法	幅475×奥行300×高さ200 (mm)		
座面高さ	200 (mm)	座面寸法	幅365×奥行265 (mm)
最大使用者体重	80 (kg)	重 量	1.2 (kg)
材 質	本体：アルミ、座面パット：EPE、脚ゴム：合成ゴム		

TAKE CARE OF
Tacaof
http://www.kowa-ws.co.jp

製品の破損や異常を発見した場合は、直ちに使用を中止し、
 ご購入販売店もしくは弊社カスタマーサポート室へご連絡下さい。
 そのまま使用しますと、重大な事故につながる危険がございます。

※本製品を他の方にお譲りになる時は、必ず本書もあわせてお渡し下さい。